

made in ASP Krakow


projekt przyłbicy ochronnej

materiał: folia PET 1 mm
technika wykonania: cięcie laserowe
arkusz: B1
skala: 1 : 1


Przyłbica została zaprojektowana i jest produkowana na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (autorzy: Tomasz Wójcik i Hubert Albertusiak).
Dozwolone jest realizowanie i modyfikowanie projektu dla celów niekomercyjnych.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1 Przełóż mocowania przez otwory, zaczynając od środkowego.

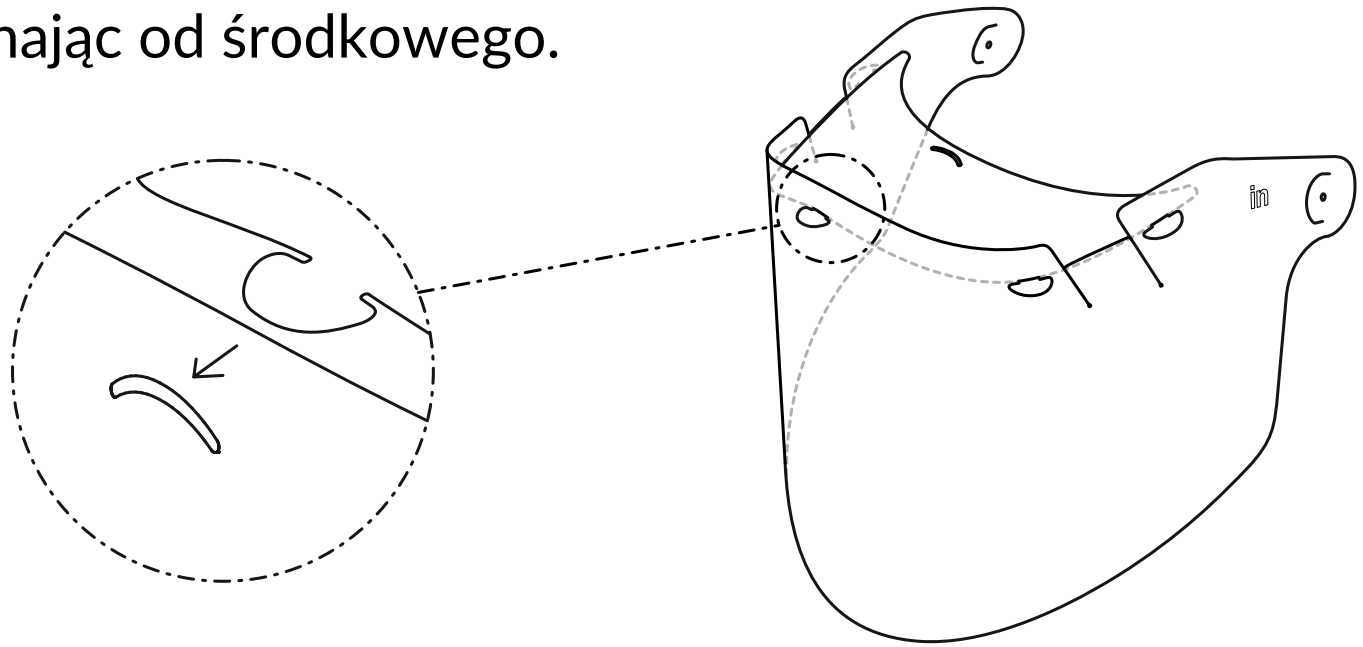

- 2 Zamontuj czapkę - naginając zakładki wsuń daszek tak, aby został dociśnięty od spodu.

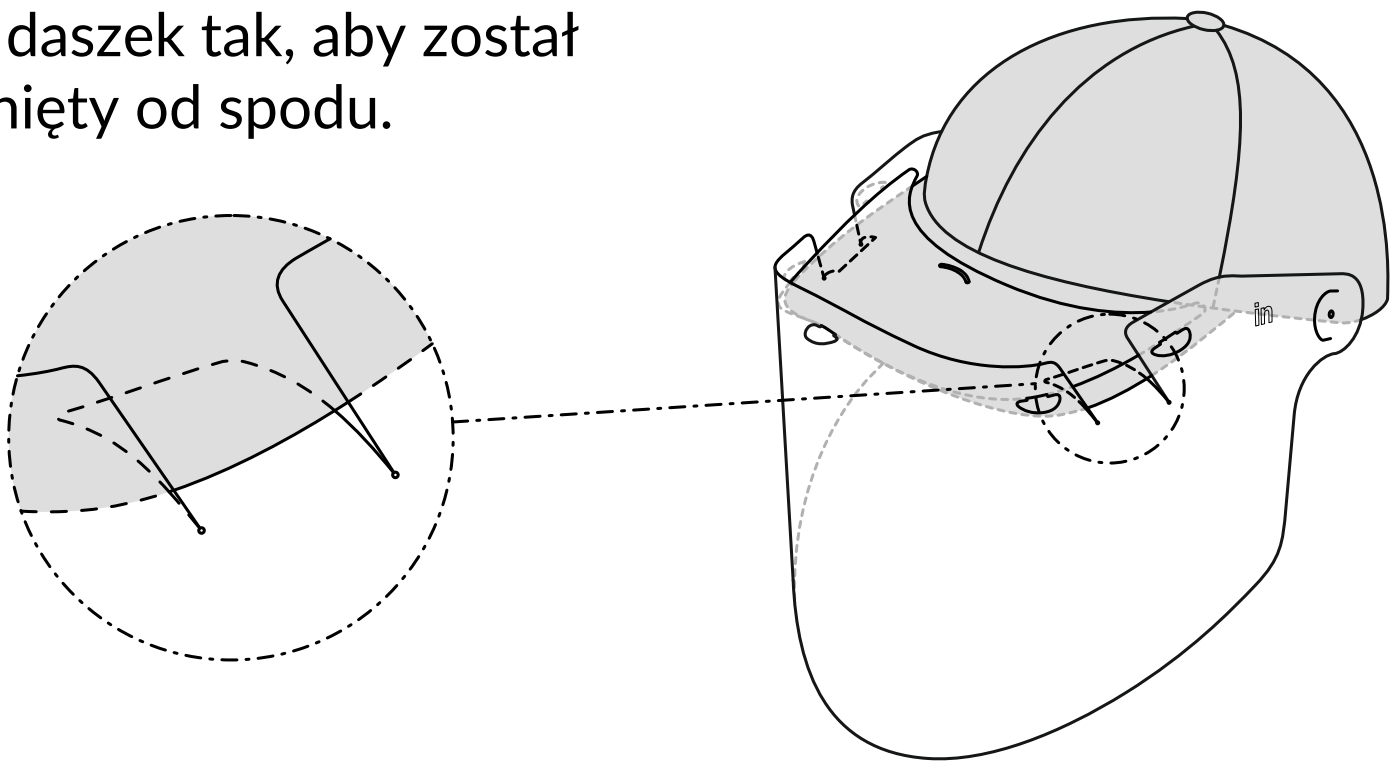

- 3 Zamiast czapki możesz zamontować pasek - zacznij od dwóch półkolistych połączeń, następnie wepnij od góry środkowy zatrzask.

